







Guía rápida



icare

Encendido del tonómetro, cargar de la sonda y medición

1. Presione el botón Seleccionar o Medir para encender el tonómetro. Ilustraciones de estas formas alternativas de empezar: (No olvide utilizar la muñequera).

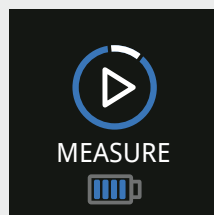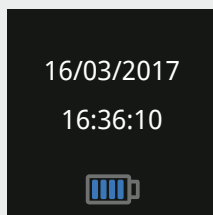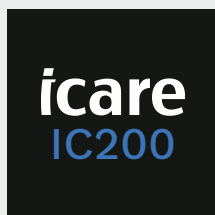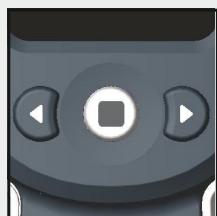

Presione el botón Seleccionar para empezar.

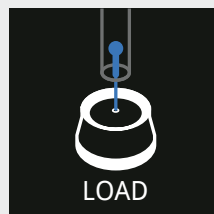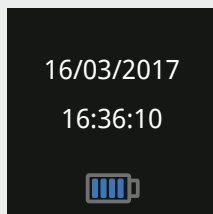

Presione el botón Medir para empezar.

2. Abra el tubo de la sonda retirando el tapón e inserte la sonda en la base para sonda según se muestra en el dibujo.





3. Cuando el símbolo de reproducción aparezca en la pantalla, seleccione entre OD (ojo derecho) y OS (ojo izquierdo) pulsando los botones de navegación o salga sin seleccionar el ojo. El tonómetro está listo para realizar mediciones.



Listo para la medición.
Selección del lado ocular:
OD, sin información u OS.

4. Asegúrese de que el apoyo para la frente esté completamente extendido girando la rueda de ajuste del apoyo para la frente. La distancia entre la punta de la sonda y la córnea del paciente (consulte la imagen siguiente) debe ser de aproximadamente 5 mm. Lleve el tonómetro frente al ojo del paciente con la sonda apuntando al centro de la córnea hasta que el soporte para la frente toque la frente. Mantenga la sonda horizontal y apuntando en perpendicular hacia el centro de la córnea.

Ajuste la distancia entre la sonda y la córnea del paciente girando la rueda de ajuste del apoyo para la frente. Se puede medir la PIO de un paciente en la posición supina, así como en posiciones verticales (sentado o de pie). No empuje accidentalmente el tonómetro o la sonda hacia el ojo.

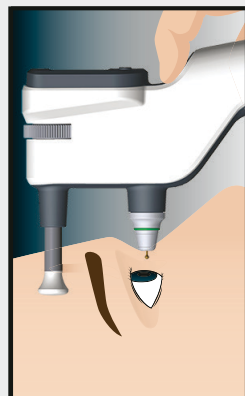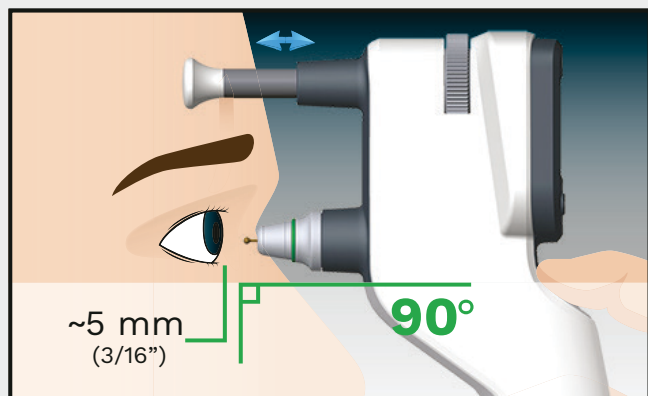

5. La sonda entrará en contacto con el ojo durante las mediciones: mantenga presionado el botón Medir para realizar 6 mediciones seguidas o bien presione el botón brevemente 6 veces para realizar 1 medición cada vez. Los segmentos grises de un círculo de la pantalla se volverán azules uno a uno.



Un pitido corto

Indica que se ha realizado una medición correctamente.


Doble pitido

Indica una única medición incorrecta. (Consulte los mensajes de error en el manual completo).


Pitido largo

Indica que se han realizado seis mediciones correctamente y se muestra el resultado de la PIO en la pantalla.

Pantalla durante las mediciones

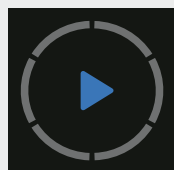

Antes

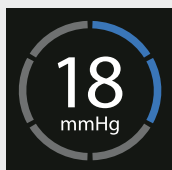


Después de la segunda medición



Después de la sexta medición



Después de la sexta medición con una variación aceptable

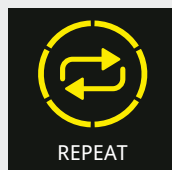

Después de la sexta medición con una variación excesiva

Partes del tonómetro

1. Apoyo para la frente
2. Base para sonda
3. Collarín de bloqueo
4. Pantalla
5. Rueda de ajuste para el apoyo para la frente
6. Botones de navegación de la interfaz de usuario
7. Botón Seleccionar
8. Botón Medir



Sustitución de la base para sonda

1. Apague el tonómetro.
2. A mano, desatornille el collarín de la base para sonda y colóquelo en una ubicación segura.
3. Tire de la base para sonda del tonómetro usando el pulgar y el resto de los dedos.
4. Inserte una nueva base para sonda en el tonómetro.
5. Atornille el collarín hasta que bloquee firmemente la base para sonda.



icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

Tel. +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones.



www.icare-world.com/ifu

www.icare-world.com

icare

CE 0598

iCare es una marca comercial de iCare Finland Oy. Icare Finland Oy, Icare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd, China iCare Medical Technology Co. Ltd, Thirona Retina B.V. y Centervue S.p.A. forman parte de Revenio Group y representan a la marca iCare. iCare IC200 es una marca comercial o marca comercial registrada de Icare Finland Oy en la UE y Estados Unidos y/o en otros países. No todos los productos, accesorios, servicios u ofertas están autorizados en todos los mercados. El etiquetado y las instrucciones aprobados pueden variar de un país a otro. Este material está destinado únicamente a profesionales de la salud. © 2025 Icare Finland Oy. Todos los derechos reservados.