






Guía rápida



icare

Encendido del tonómetro, cargar de la sonda y medición

- 1.** Presione el botón Seleccionar o Medir para encender el tonómetro. Ilustraciones de estas formas alternativas de empezar: (No olvide utilizar la muñequera).

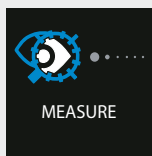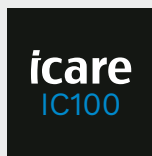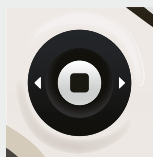

Presione el botón Seleccionar para empezar.

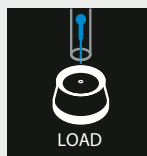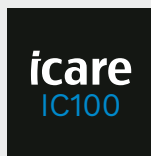

Presione el botón Medir para empezar.


- 2.** Abra el tubo de la sonda retirando el tapón e inserte la sonda en la base para sonda tal como se muestra en la imagen.





- 3.** Cuando aparezca el símbolo de reproducción en la pantalla, el tonómetro estará listo para realizar mediciones.



- 4.** Pida al paciente que se relaje y que mire al frente hacia un punto determinado. Acerque el tonómetro al ojo del paciente.

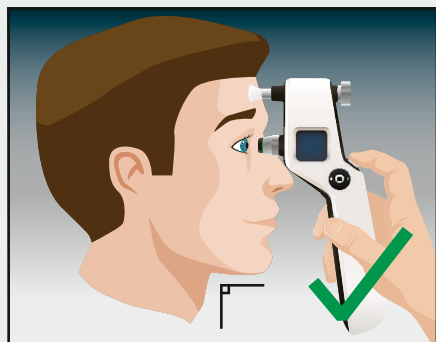

5. Mantenga la sonda horizontal y apuntando en perpendicular hacia el centro de la córnea. La distancia desde la punta de la sonda hasta la córnea del paciente debe ser de 4 a 8 mm. La luz de la base para sonda debe ser de color verde.

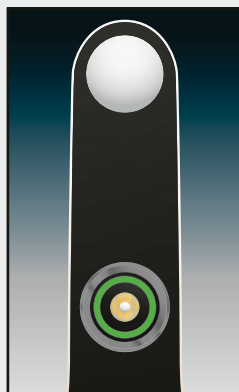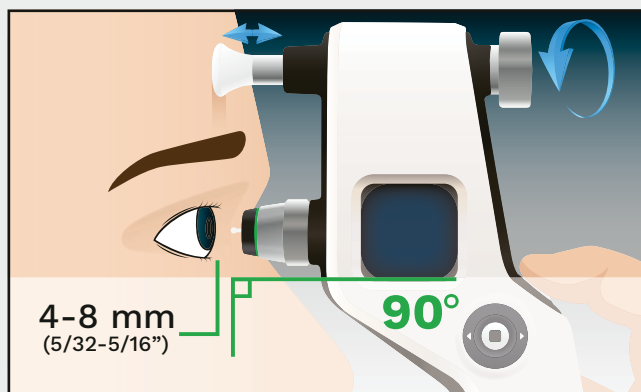

Indicación luminosa verde de la base para sonda

6. Presione el botón Medir para medir la PIO. La sonda entrará en contacto con el ojo durante las mediciones: mantenga presionado el botón Medir para realizar 6 mediciones seguidas o bien presione el botón brevemente 6 veces para realizar 1 medición cada vez.



Un pitido corto

Indica que se ha realizado una medición correctamente.


Doble pitido

Indica una única medición incorrecta. (Consulte los mensajes de error en el manual completo).

Pitido largo

Indica que se han realizado seis mediciones correctamente y se muestra el resultado de la PIO en la pantalla.

Pantalla durante las mediciones

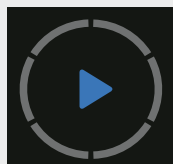


Antes




Después de la segunda medición



Después de la sexta medición

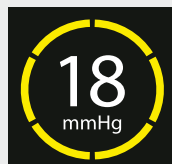



Después de la sexta medición con una variación aceptable

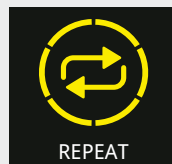

Después de la sexta medición con una variación excesiva

Partes del tonómetro

1. Rueda de ajuste del apoyo para frente
2. Pantalla
3. Botón Medir
4. Botón Seleccionar
5. Apoyo para la frente
6. Base para sonda y luz de la base para sonda
7. Collarín
8. Botones de navegación

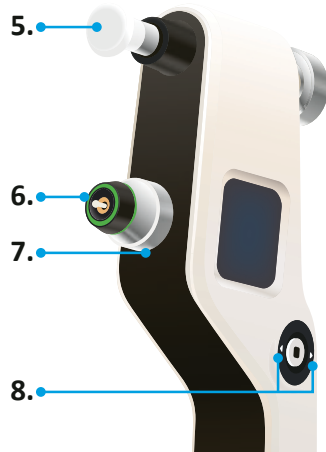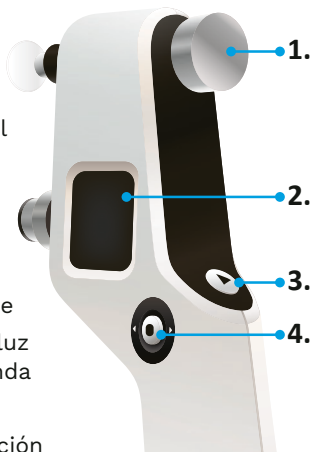

Sustitución de la base para sonda

1. Apague el tonómetro.
2. A mano, desatornille el collarín de la base para sonda y colóquelo en una ubicación segura.
3. Tire de la base para sonda del tonómetro usando el pulgar y el resto de los dedos.
4. Inserte una nueva base para sonda en el tonómetro.
5. Atornille el collarín hasta que bloquee firmemente la base para sonda.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

Tel. +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



Para obtener más información,
consulte el manual
de instrucciones.



www.icare-world.com/ifu

www.icare-world.com

icare

CE 0598

iCare es una marca comercial de iCare Finland Oy, iCare Finland Oy, iCare USA, Inc., iCare World Australia Pty Ltd, China iCare Medical Technology Co. Ltd, Thirona Retina B.V. y Centervue S.p.A. forman parte de Revenio Group y representan a la marca iCare. iCare IC100 es una marca comercial o marca comercial registrada de iCare Finland Oy en la UE y Estados Unidos y/o en otros países. No todos los productos, accesorios, servicios u ofertas están autorizados en todos los mercados. El etiquetado y las instrucciones aprobados pueden variar de un país a otro. Este material está destinado únicamente a profesionales de la salud. © 2025 iCare Finland Oy. Todos los derechos reservados.